




BRUGER MANUAL

PowerBoots Recover Maskine – 8 kamre

INTRODUKTION

Tryk terapi behandling er en førsteklasses lymfe drænage og naturlig sundhedsbehandling på det sundhedsfaglige marked. Kompression systemet giver en blød massage fra fødder til hjerte, som giver en slankende behandling ved dræning af opløste fedtceller eller mindre god aflejring. På det medicinske marked har det en sekventiel klemning (tryk behandling) fra distalt (længst væk fra hjertet) til proximalt (tættest på hjertet) og hjælper dermed til at forbedre cirkulationen af blod og lymfe og forhindrer DVT og PE, traumer, betændelse og ødemlindring.

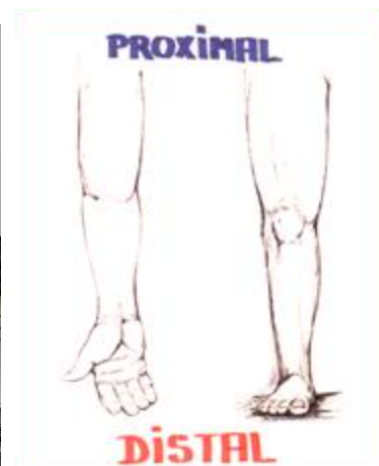

Funktioner:



Luftryk kompression terapi maskine

Vitaliserer cirkulationen af blod og lymfe i arme og ben og øger muskelvævets tryk for at fjerne hævelse eller smerte. Det hjælper også med at genoprette personers fysiske funktioner fra handicap eller alderdom.

- Sportsmassage;
Hjælper via pre-træning med at løsne muskler og efter-træning for at hjælpe musklerne med at komme sig igen ved at befri musklerne for mælkesyre og affaldsstoffer.
- Forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme relateret til blodcirkulation i arterier, herunder lymfeødem
- Luftkompressionsmaskinen fremmer cirkulationen af blod og kropsvæske.

Programmer:

- Program A er afslappende massage, som hos en sportsmassør.
- Program B er for lymfe ødemer eller DVT forebyggelse og behandling.
- Program C er afslappende og dybdegående massage med genopbygning af muskulatur.
- Program D er dræning af fedtceller i ben / arme / hofte.
- Program E er forbedring af blod cirkulation og lymfe dræning.
- Program F er kombination af program A + C + D

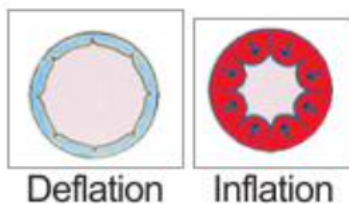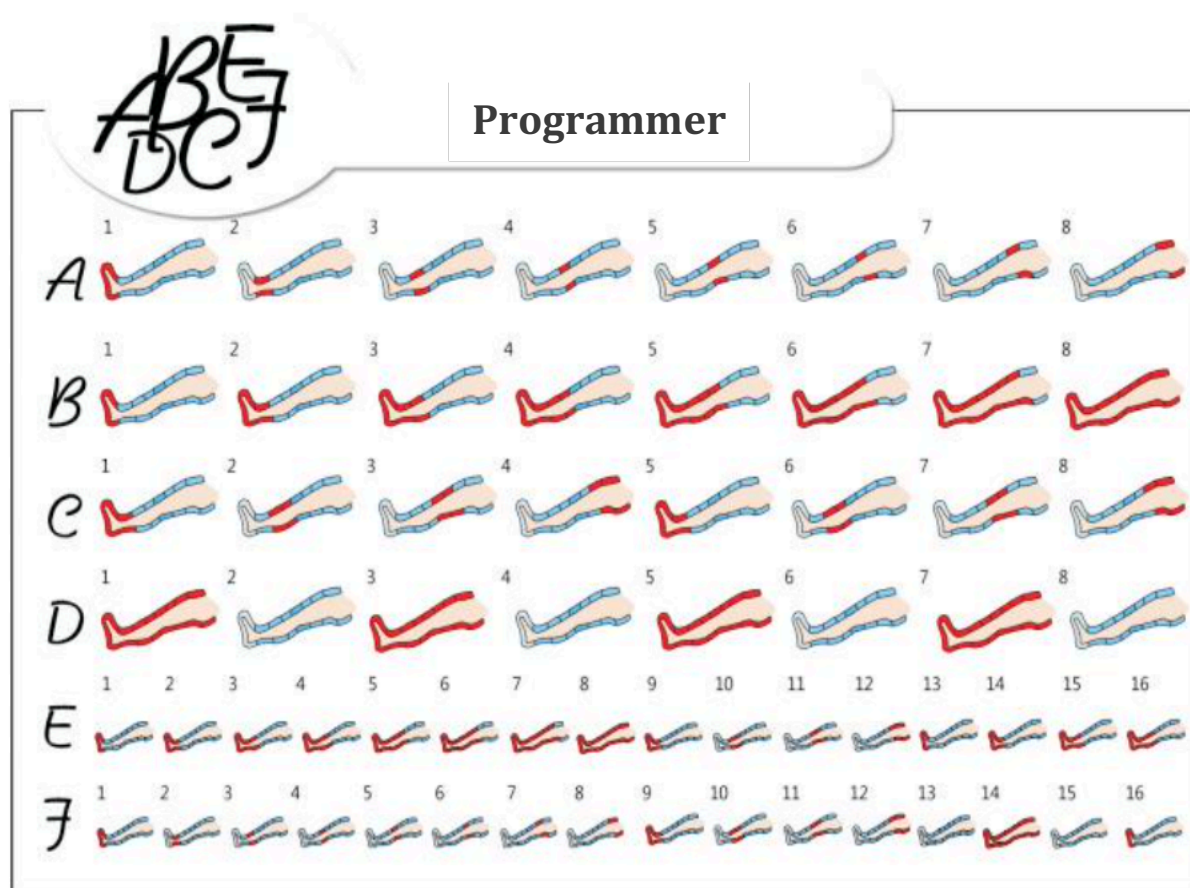

OBS! Inden du sætter maskinen til første gang skal du fjerne "transport skruen" som er placeret i bunden af maskinen. Hvis du flytter maskinen rundt ofte eller kører rundt med maskinen anbefales det at isætte skruen under transport.

Vi anbefaler at man stille og roligt afprøver de forskellige programmer, for at finde frem til, hvilke programmer man har størst glæde af. Lige så anbefales det at starte med 10-20 minutters behandling og med tryk på 50-120 inden man øger såvel tiden som trykket. Bemærk at forskellige programmer har forskellig effekt og der er derfor forskel på, hvor lidt/meget man kan klare af tryk, alt efter program og tid.

Udstyr til din PowerBoots Recover Maskine:

Når du køber din PowerBoots Pro el. Basic følger der et sæt ben/støvler inkl. lufttryk kabler samt kablesamler. Disse ben/støvler kommer i 2 længder, hhv. 110 cm og 120 cm. Vælger du 110cm i længde er omkredsen ved lårene 70cm og ved 120 cm længde er omkredsen 75 cm. Kan du ikke – uanset længden – lukke støvlerne helt op, anbefaler vi at man tilkøber et sæt "Ben udvidelser" som udvider med 3-6 cm. Er der behov for yderligere udvidelse kan flere sæt sættes sammen.

PowerBoots maskinerne kommer i en tilhørende kasse, hvor der er god plads til at opbevare maskine og støvler og andet udstyr man bruger. Ønskes det kan man alternativt tilkøbe en PowerBoots Opbevaringstaske, som både har en smart hank og tilhørende sele til at bære maskine og tilbehør.

Udover ben/støvler kan man også få et mavebælte som arbejder på såvel ryg som mave. Alle programmer er funktionelle med mavebæltet, da dette også har 8 kamre. Der medfølger separat lufttryk kabel til mavebæltet, hvilket gør det let at tage ben/støvler ud af maskinen og isætte mavebælte kablet.

På samme måde som ben/støvler kan man også få en arm, som også har 8 kamre og dermed har samme funktionalitet som støvlerne. Bemærk at ben/støvler sælges i sæt, hvor arm er 1 selvstændig enhed. Ønsker man behandling på begge arme, skal der købes 2 stk. arme samt en ekstra kabel connector (den samme kan benyttes til ben/støvler, men vi anbefaler ikke at skille og samle mange gange).

Skulle du have brug for reservedele kan du tilkøbe disse på webshoppen eller via en butik.

PowerBoots laver kun 2 maskiner:

Pro – som er den mest populære model der primært benyttes i husstanden. Denne model er lidt tungere end den transportable model og kræver konstant strøm, men kræver ingen opladning.

Basic – som er den transportable model, der vejer mindre og er lettere at tage med på rejser osv. Den transportable model kører på batteri og kan oplades let, også mens den er i brug.

Vi har tidligere produceret både 4, 6 og 8 kamre, men den bedste effekt opnås ved 8 kamre, specielt fordi man på 8 kamre maskinerne kan slå enkelte kamre fra og til som det ønskes. Ønskes en maskine med 4 eller 6 kamre kan disse forudbestilles (med ca. 2-3 måneders leveringstid).

PowerBoots ApS - Produktionsvej 24 - 2600 Glostrup - info@powerboots.dk